


# FICHE TECHNIQUE / INTRA PILE



## CHAQUE SOIR

1. Retirer son appareil auditif en tirant sur le fil
2. Ouvrir le tiroir de la pile afin d'arrêter l'appareil
3. Mettre du produit sur un mouchoir et essuyer l'appareil pour le nettoyer

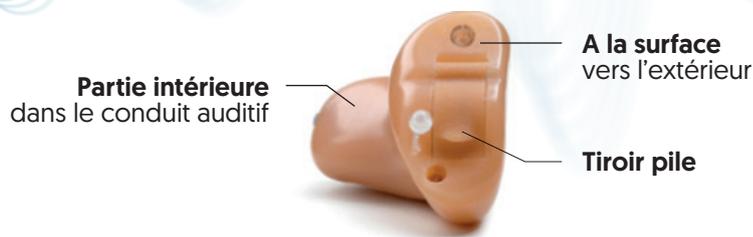

## CHAQUE MATIN

Mettre en place son appareil auditif après la toilette

Côté bleu à gauche, côté rouge à droite



## VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

Mettez vos appareils dans le creux de la main.

1. Si vous entendez un sifflement : l'appareil fonctionne
2. S'il n'émet aucun son :
  - Il faut changer la pile
  - L'appareil est bouché : changer le filtre



## CHANGEMENT DE PILE

L'appareil vous indique qu'il faut changer la pile par un signal sonore

1. Ouvrir le tiroir de la pile
2. Retirer la pile
3. Après avoir enlevé l'étiquette, insérer la pile côté plat vers le haut